




МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

VF-M18

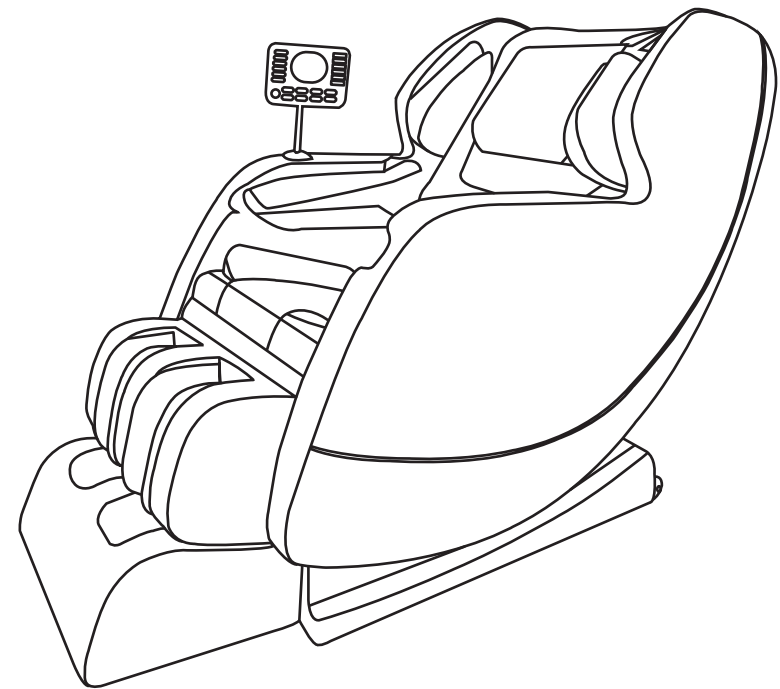

Благодарим за приобретение нашего массажного кресла

Благодаря эргономической конструкции оно обеспечивает одновременный массаж нескольких зон, включая спину, поясницу, бедра, ноги, руки и т.д. Это шикарное кресло позволяет выбирать между несколькими видами массажа, такими как массаж Шиацу, разминание и постукивание, роликовый массаж, массаж воздушными подушками и т.д. Для обеспечения правильной работы и эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, в особенности раздел о правилах техники безопасности. Храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения в будущем.

Каталог

Безопасность	2
Характеристики и параметры	5
Инструкции по дистанционному управлению	6
Инструкции по управлению массажем	7
Этапы/методики установки	8
Ежедневный уход и устранение неполадок	9

Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую компанией. Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Производитель /Manufactory:

Фуан Мифали Электроникс ЛТД / Fuan Mifaly Electronics Co., Ltd

Адрес/Address:

NO.20 Даченг улица, Город Чэньян, Город Фуань, Город Ниндэ, провинция Фуцзянь/ NO.20 Dacheng Road, Chengyang Town, Fuan City, Ningde City, Fujian Province

Страна изготовления: Китай/China

Поставщик:

ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

Ежедневный уход и устранение неполадок

1. Ежедневная чистка: пожалуйста, используйте нейтральные чистящие средства и мягкую ткань. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.
2. При повреждении шнура питания во избежание опасности его необходимо заменить, обратившись к производителю или сертифицированному мастеру.
3. Если вы не пользуетесь массажным креслом или решили провести чистку, извлеките шнур питания из розетки.
4. Во избежание повреждения поверхности кресла не касайтесь его острыми предметами.
5. Не помещайте кресло во влажную среду. Его можно использовать исключительно в сухом и хорошо вентилируемом помещении.

Неполадка	Возможные причины	Методы устранения
Звук (работающего мотора) Звук накачивания воздушной подушки Звук опорожнения воздушной подушки Звук срабатывания электромагнитного клапана Звук работы воздушного насоса.	При включенном кресле Механический звук.	Норма. Не требует устранения.
Кресло полностью не работает.	Шнур питания не вставлен в розетку. Переключатель питания не включен. Не нажата кнопка массажа.	Проверьте розетку и шнур питания. Убедитесь, что штекер в рабочем состоянии и плотно вставлен в розетку. Нажмите кнопку включения.
Массаж внезапно прекратился.	Кресло завершило 15-минутный массажный цикл и автоматически переключилось в режим ожидания.	Если вы хотите провести дополнительный массаж, нажмите соответствующую кнопку.
	Сработала защита мотора от перегрева.	После завершения эксплуатации выключите кресло и извлеките вилку из розетки.

Безопасность

Пожалуйста, внимательно прочитайте все положения руководства перед использованием кресла.

Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмирования окружающих тщательно соблюдайте следующее:

- 1) Когда кресло не используется, убедитесь, что вилка шнура питания извлечена из розетки. Также эту процедуру необходимо обязательно выполнять перед разборкой или заменой частей кресла.
- 2) Во избежание возгорания, повреждения электрическим током или риска перегрева не кладите в процессе работы на кресло одеяла, подушки и подобные предметы.
- 3) Использование кресла детьми, а также лицами с ограниченными физическими и умственными способностями должно осуществляться исключительно под надзором взрослых.
- 4) Использовать кресло можно только для целей, изложенных в настоящем руководстве. Используйте исключительно запасные части, рекомендованные производителем.
- 5) Откажитесь от использования кресла при обнаружении следующего: повреждение шнура питания или вилки; нарушенная работа кресла; нарушение заземления; попадание воды на поверхность кресла. Пожалуйста, во всех подобных случаях обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- 6) Если вы хотите передвинуть кресло, не тяните за шнур питания. Кроме того, не используйте шнур в качестве ручки.
- 7) Избегайте нахождения шнура питания вблизи нагретых поверхностей и источников тепла.
- 8) Не включайте кресло при заблокированном воздухоотводном отверстии. Следите за тем, чтобы воздухоотвод не был нарушен, а также забит пылью и волосами.
- 9) Избегайте попадания или проникновения каких бы то ни было посторонних объектов в любые отверстия кресла.
- 10) Пожалуйста, не используйте кресло вне помещения.
- 11) Пожалуйста, избегайте попадания распыленных веществ на поверхность кресла.
- 12) Не забывайте отключать питание. По окончании использования, пожалуйста, выключите все переключатели и извлеките вилку из розетки.
- 13) Следите за тем, чтобы дети не использовали кресло для своих игр..

1. Безопасность

- Во избежание поражения электрическим током или поломки массажного кресла не используйте его в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью.
- Не включайте массажное кресло при температуре внутри помещения свыше 40°C
- Не используйте кресло вблизи электрических обогревателей, печей или же под воздействием прямых солнечных лучей.
- Это массажное кресло предназначено для домашнего использования и не подходит для применения в коммерческих целях.


Будьте осторожны

- Кресло предназначено сугубо для использования внутри помещения.
- Если вы используете кресло в помещении с низкой температурой, избегайте резкого повышения окружающей температуры. Рекомендуется перед включением постепенно довести температуру до рабочего диапазона.
- Если массажное кресло перемещается из холодильного хранилища в теплое помещение, это может негативно сказаться на его работе и даже привести к поломке из-за накопления конденсата внутри кресла.


2. Безопасная эксплуатация

- Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации кресла, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования.
- Не включайте кресло при обнаружении поврежденной оболочки или упаковки.
- Во избежание получения травм или снижения массажного эффекта избегайте одновременного использования массажного кресла и других электрических устройств вроде электро-одеяла.
- Во избежание возможных негативных последствий не используйте массажное кресло в течение часа после принятия пищи.
- Не включайте кресло влажными руками и не используйте его в том случае, если другие части вашего тела влажные или мокрые.

Этапы/методики установки

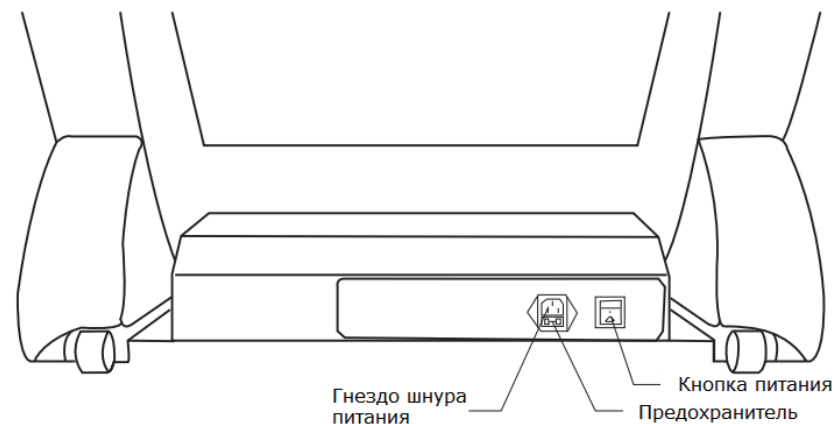

Внимание

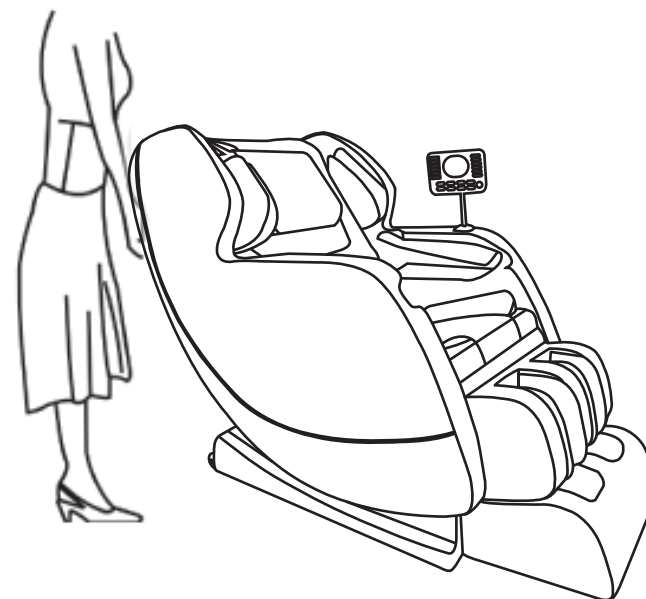

для перемещения кресла надавите на спинку и приподнимите передний край.

- ① Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания не зажат под массажным креслом.
- ② Убедитесь в наличии надлежащего заземления.
- ③ Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что все переключатели, в том числе кнопка питания, находятся в выключенном положении.

Инструкции по управлению массажем



Нажмите эту кнопку.

Появится индикация включения и выключения массажного кресла.

Кнопка выбора режима массажа: Ручной/Автоматический

При включении, кресло по умолчанию переходит в автоматический режим.

Для перехода в ручной режим нажмите данную кнопку. После этого вы можете использовать функциональную кнопку на нижней панели для выбора режима массажа.

1. пять кнопок автоматического режима слева

- 1) Разминающий: В ручном режиме нажмите эту кнопку для включения/выключения Разминающего массажа шеи.
- 2) Массаж Шиаци: В ручном режиме нажмите эту кнопку для включения/выключения массажа Шиаци поясничной зоны.
- 3) Интенсивный массаж: В ручном режиме нажмите эту кнопку для включения/выключения массажа всей спины.
- 4) Расслабляющий массаж: В ручном режиме нажмите эту кнопку для включения/выключения программы массажа всего тела с функцией воздушно-компрессионного массажа.
- 5) Массаж сон: в ручном режиме нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить программы режима массажа всего тела во время сна с функцией воздушно-компрессионного массажа.

2. пять кнопок справа для функций управления подушками воздушно-компрессионного массажа.

- 1) АВТО давление: нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию давления воздушных подушек на все тело.
- 2) Воздушные подушки для плечей / рук: нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию подушки на плечи и руки.
- 3) Подушка для сидения /подголовника: нажмите эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию давления подушки для сидения и подголовника
- 4) Ноги: нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию давления подушек для ног.
- 5) Давление: нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать силу надавливания подушки

3. нижние кнопки пульта для ручного режима:

- 1) Ручной: нажмите эту кнопку для включения/выключения ручного режима.
- 2) Невесомость: нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию нулевой гравитации.
- 3) Скорость + : нажмите эту кнопку для увеличения скорости массажа.
- 4) Скорость - : нажмите эту кнопку для уменьшения скорости массажа.
- 5) Ноги / ступни: нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию массажа ягодиц и ступней.
- 6) Скорость роликов ног: нажмите эту клавишу, чтобы отрегулировать скорость роликов для ягодиц и ступней.
- 7) Нагрев: нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию нагрева.
- 8) Таймер: нажмите эту кнопку, чтобы настроить время работы от 5 до 30 минут.

4. Опускание и поднятие спинки кресла:


- 1) Вверх: нажмите эту клавишу, чтобы поднять спинку кресла
- 2) Вниз: нажмите эту клавишу, чтобы опустить спинку кресла.

- Пожалуйста, избегайте попадания посторонних объектов или воспламеняющихся веществ внутрь кресла. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, поломке или возгоранию.
- Во избежание перегрева или возгорания не накрывайте кресло во время работы.
- При появлении любого дискомфорта во время массажа немедленно выключите кресло.
- Данное изделие не предназначено для диагностики или лечения. Если вы нуждаетесь в диагностике или лечении, обратитесь к медицинскому персоналу соответствующей квалификации.
- Если у вас присутствует острое или хроническое заболевание, а также если вы принимаете медицинские препараты, проконсультируйтесь с врачом перед использованием кресла. На поздних сроках беременности или при недомогании откажитесь от использования кресла.
- На ранних сроках беременности перед использованием кресла проконсультируйтесь с врачом и строго следуйте его рекомендациям.
- Продолжительность работы кресла в режиме массажа - 15-30 минут. Перед повторным использованием убедитесь, что кресло было выключено в течение периода не менее 10 минут. В противном случае может сработать защита от перегрева, в результате чего кресло выключится.
- Людям с нарушенной тепловой чувствительностью необходимо быть крайне внимательными при использовании кресла.

Будьте осторожны

- Пожалуйста, избегайте использования кресла в состоянии опьянения.
- Избегайте прямого массажа головы, локтевых и коленных суставов, грудной клетки и живота.
- Если вы случайно распылили жидкость на массажное кресло, незамедлительно извлеките вилку из розетки. Ни в коем случае не касайтесь вилки мокрыми или влажными руками.
- Не повреждайте шнур питания и не включайте кресло с поврежденным шнуром питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или поломке кресла.
- Немедленно выключите кнопку питания, извлеките вилку из розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр, если произошло следующее:
- Вы случайно разлили воду на поверхность кресла. Это может привести к поражению электрическим током.
- Обивка кресла повреждена, в результате чего открылся доступ к внутренним частям.
- Во время массажа вы чувствуете сильный дискомфорт или боль. Незамедлительно прекратите использовать кресло и обратитесь к врачу.
- Вы обнаружили явную неисправность или нарушение нормальной работы кресла. Немедленно прекратите его использовать.
- Если вы обнаружили неисправность, извлеките вилку из розетки во избежание случайного включения кресла.
- На улице наблюдаются гром или молнии.

Характеристики и параметры

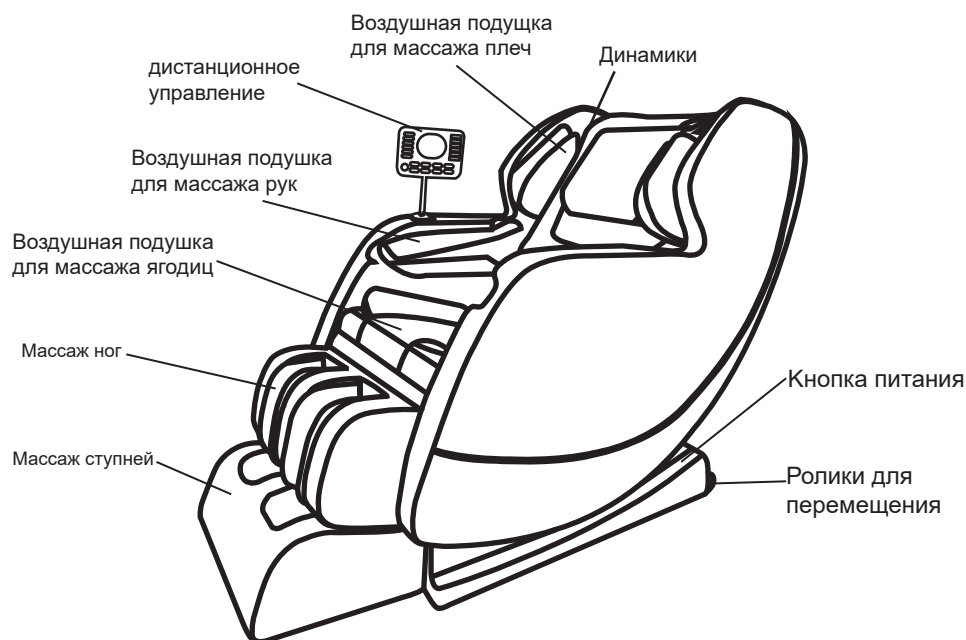

Название изделия	Массажное кресло VictoryFit VF-M18
Номер модели:	VF-M18
Мощность:	< 150 Вт
Входящее напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Продолжительность рабочего цикла	15 минут

Инструкции по дистанционному управлению



1. Пять кнопок слева: автоматические режимы
2. Пять кнопок справа: функции давления воздушной подушки
3. Нижние кнопки: кнопки ручной регулировки

Воспроизведение музыки по Bluetooth:

Используйте функцию Bluetooth на мобильном устройстве для подключения к креслу и воспроизводите на нем музыку при помощи плеера. Имя устройства при Bluetooth-поиске на мобильном устройстве - «Bluetooth». Пароль - 8888